

Installation Windows

> LabVIEW wird seit Version 2025 Q3 nicht mehr per Seriennummer sondern per Verbindung mit einem Lizenzserver lizenziert.
> Lizenzserver: **gitzliclabview.tu-bs.de:28000** / **gitzliclabview.tu-braunschweig.de:28000**


Nachdem Sie die ISO-Datei eingebunden haben, starten Sie das Installations-Setup mit dem Namen "Install.exe". Es startet der NI-Paketmanager.

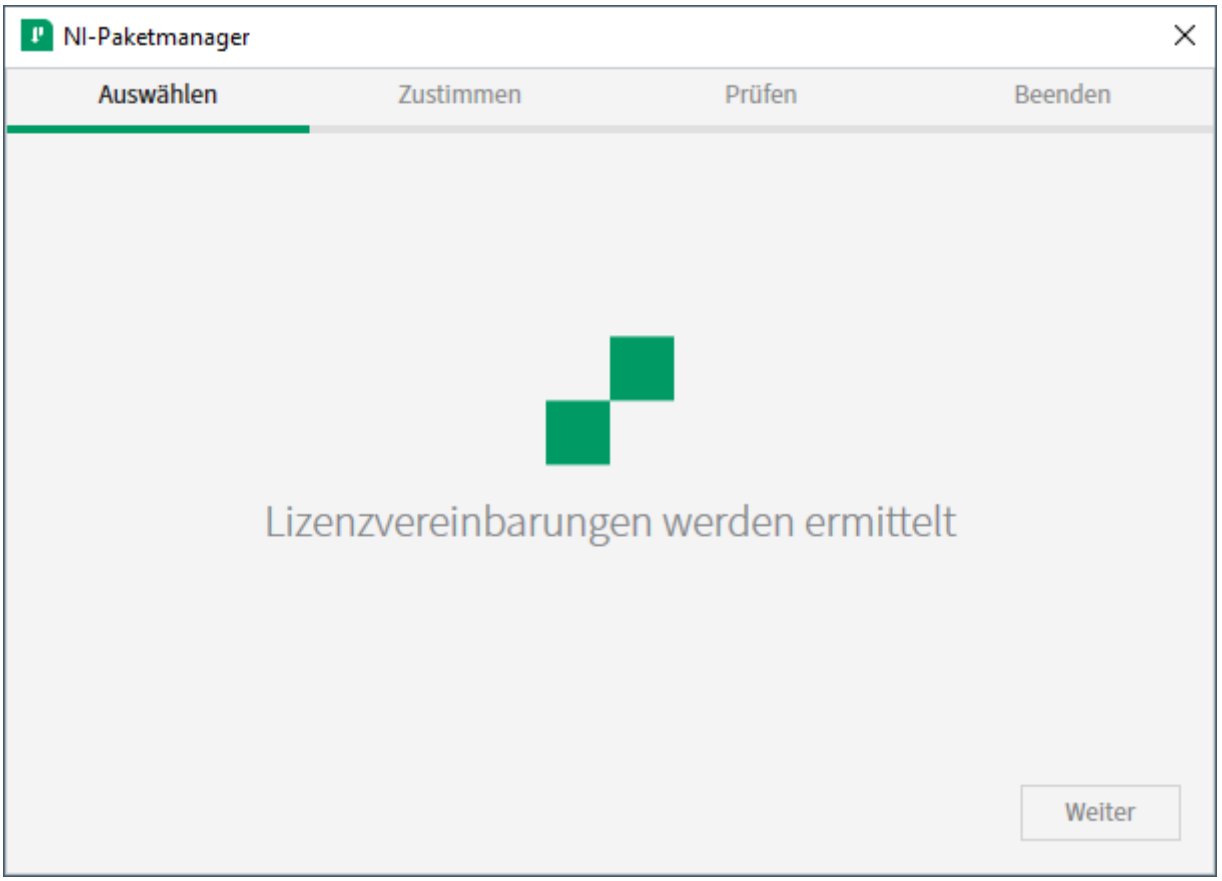


Akzeptieren Sie beide Lizenzvereinbarungen.

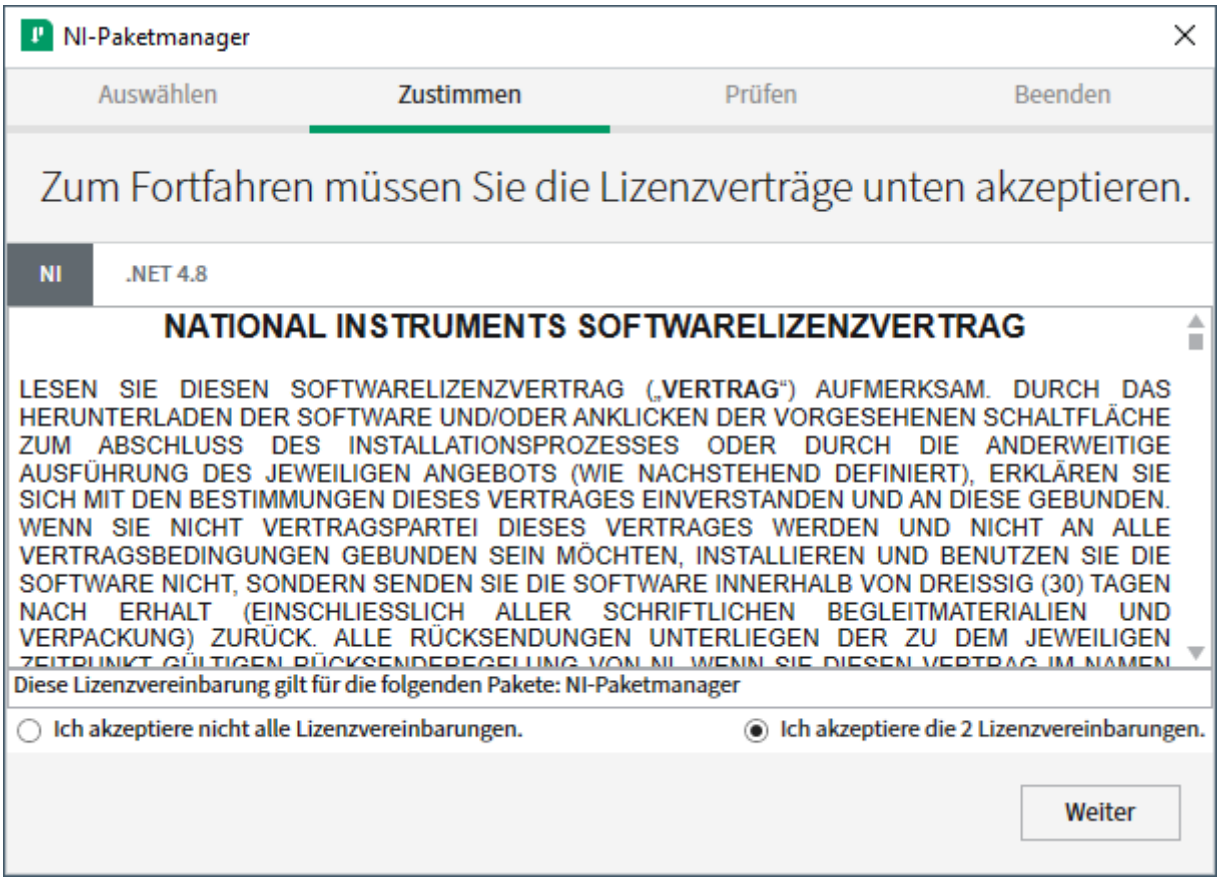


Im nächsten Schritt bestätigen Sie die Installation des NI-Paketmanagers mit **[Weiter]**.

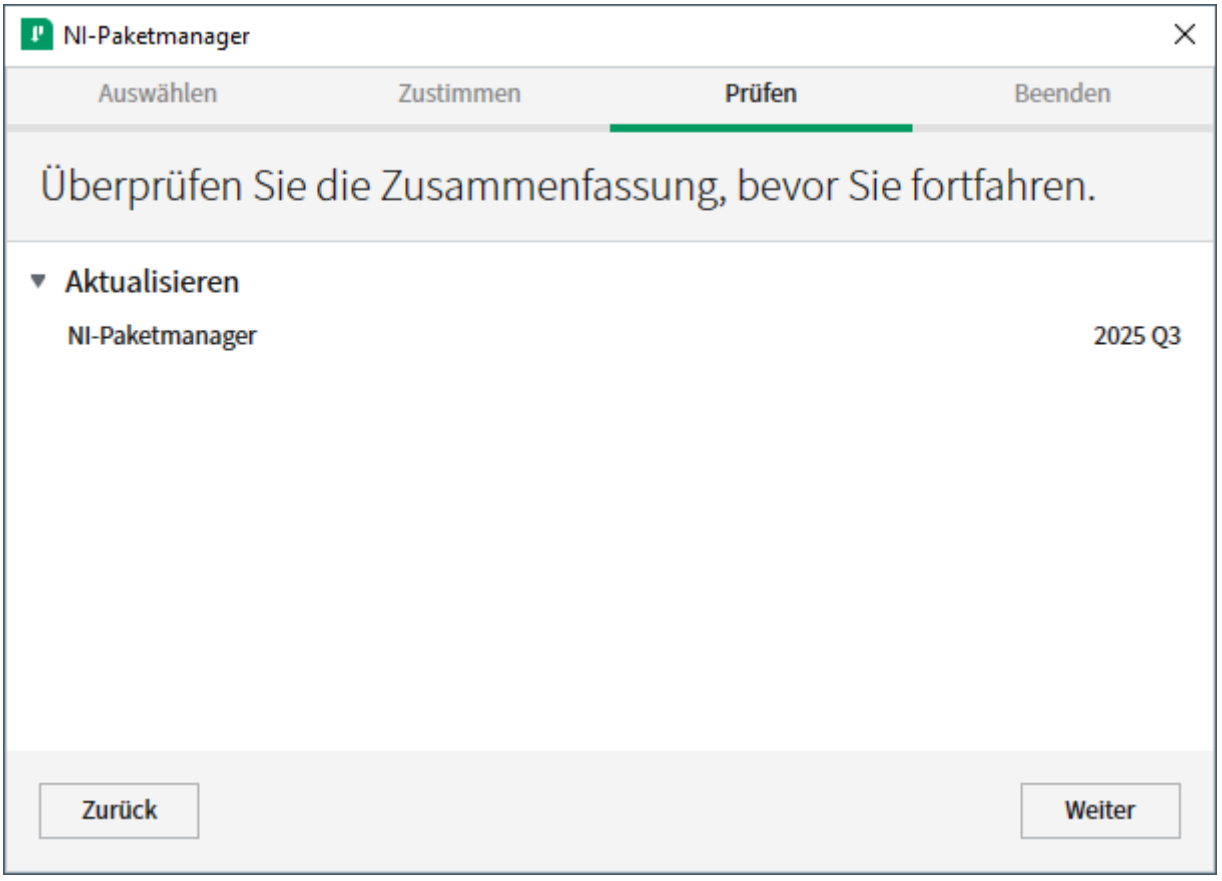


Der NI-Paketmanager wird nun installiert.

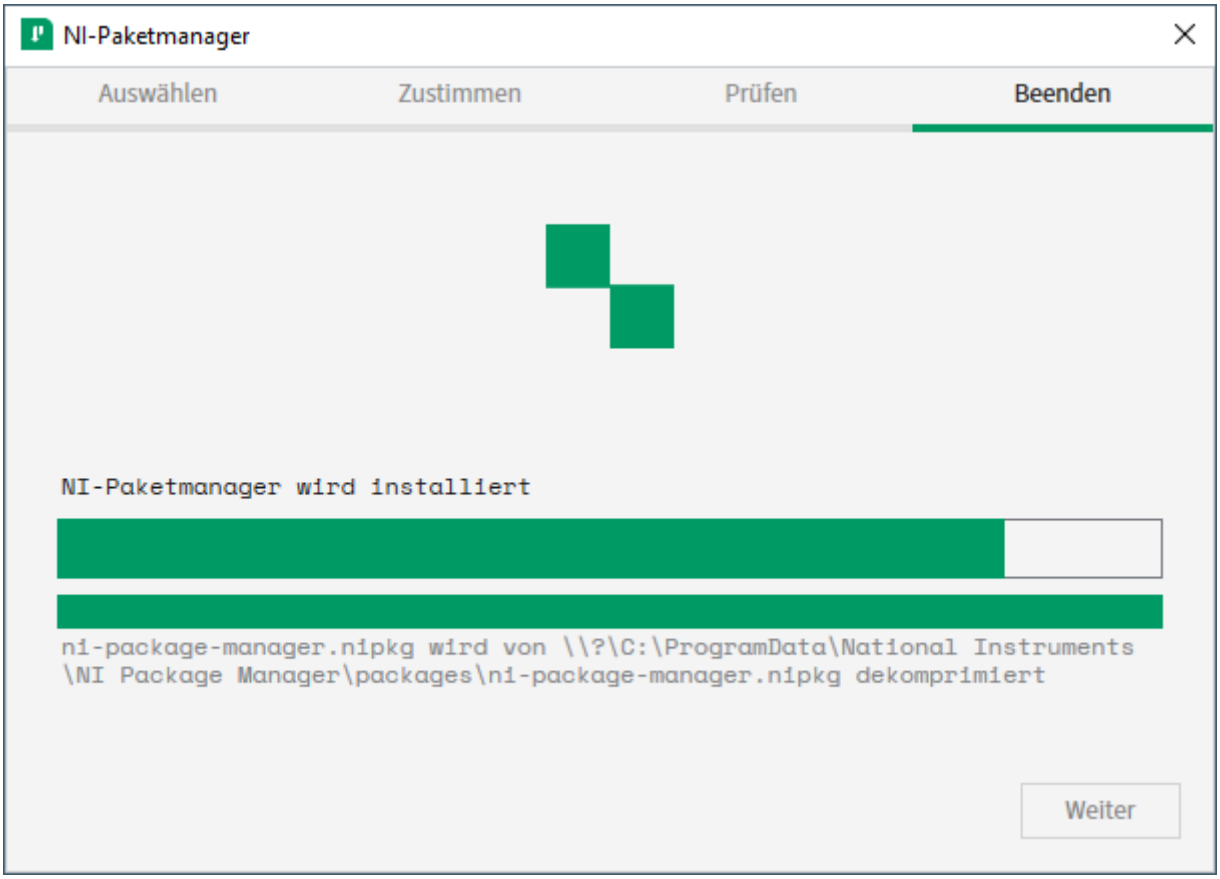


Nach erfolgreicher Installation des NI-Paketmanagers öffnet sich dieser und das Installations-Setup des NI Software Plattform Bundles beginnt. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschten Softwarepakete aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.

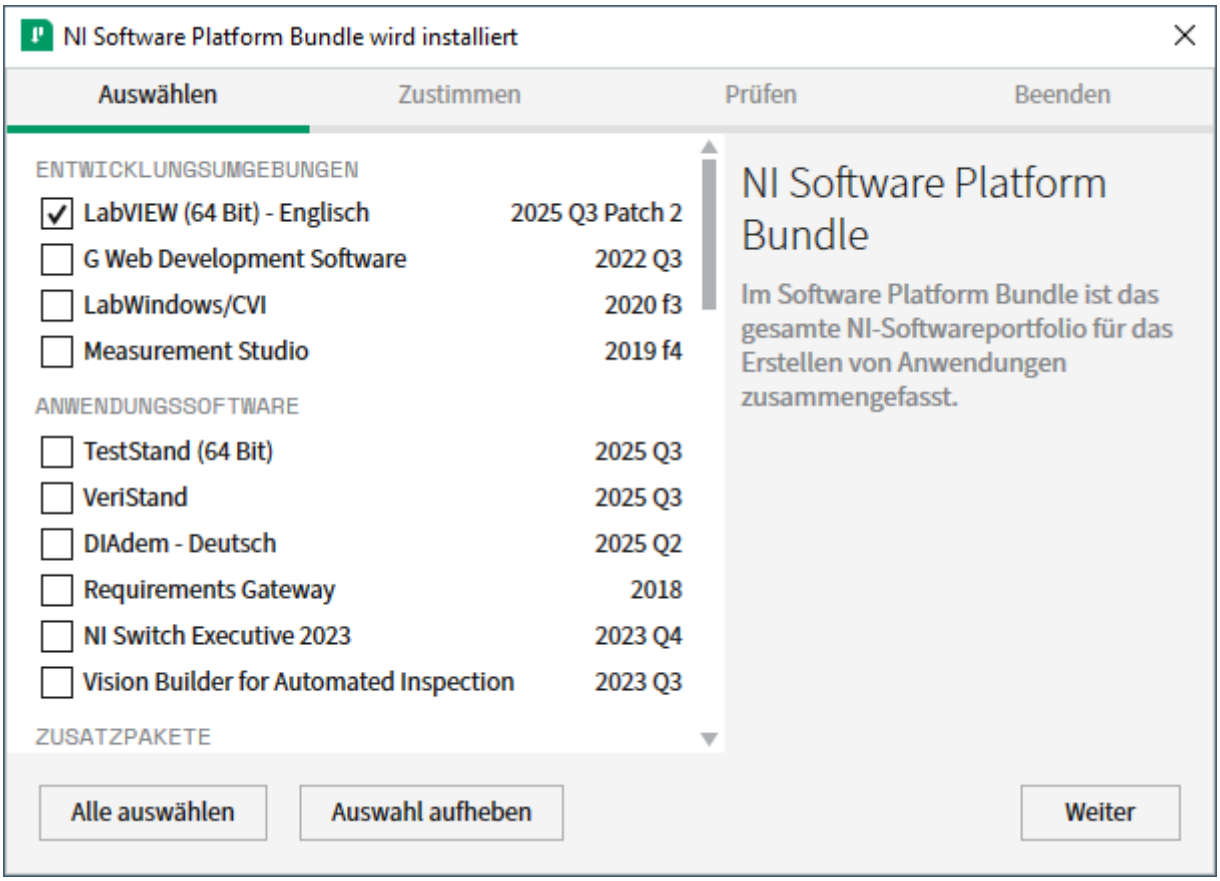


Im nächsten Schritt werden weitere Objekte zur Installation vorgeschlagen, die zu Ihrer vorherigen Auswahl passen. Wählen Sie erneut aus, welche Objekte Sie installieren möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.

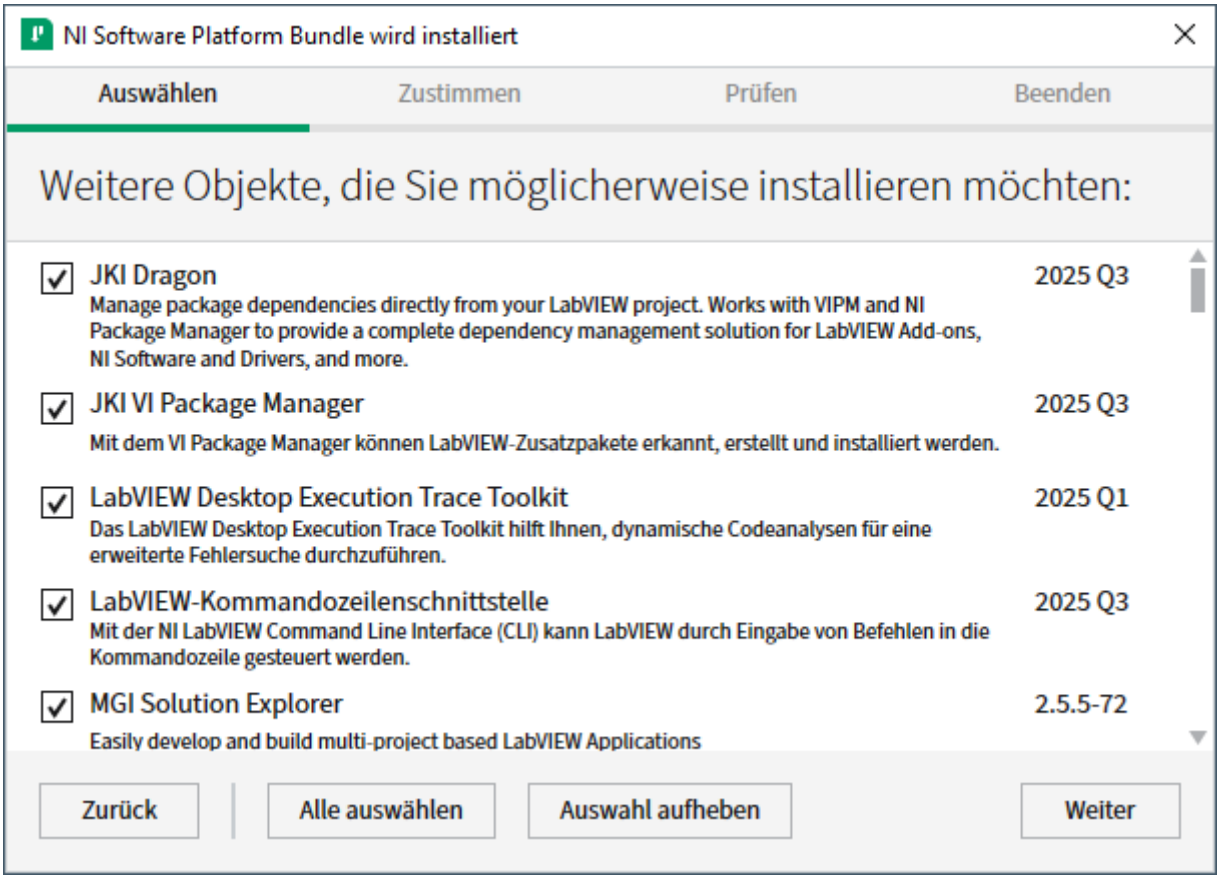


Bestätigen Sie die zugehörigen Lizenzvereinbarungen.

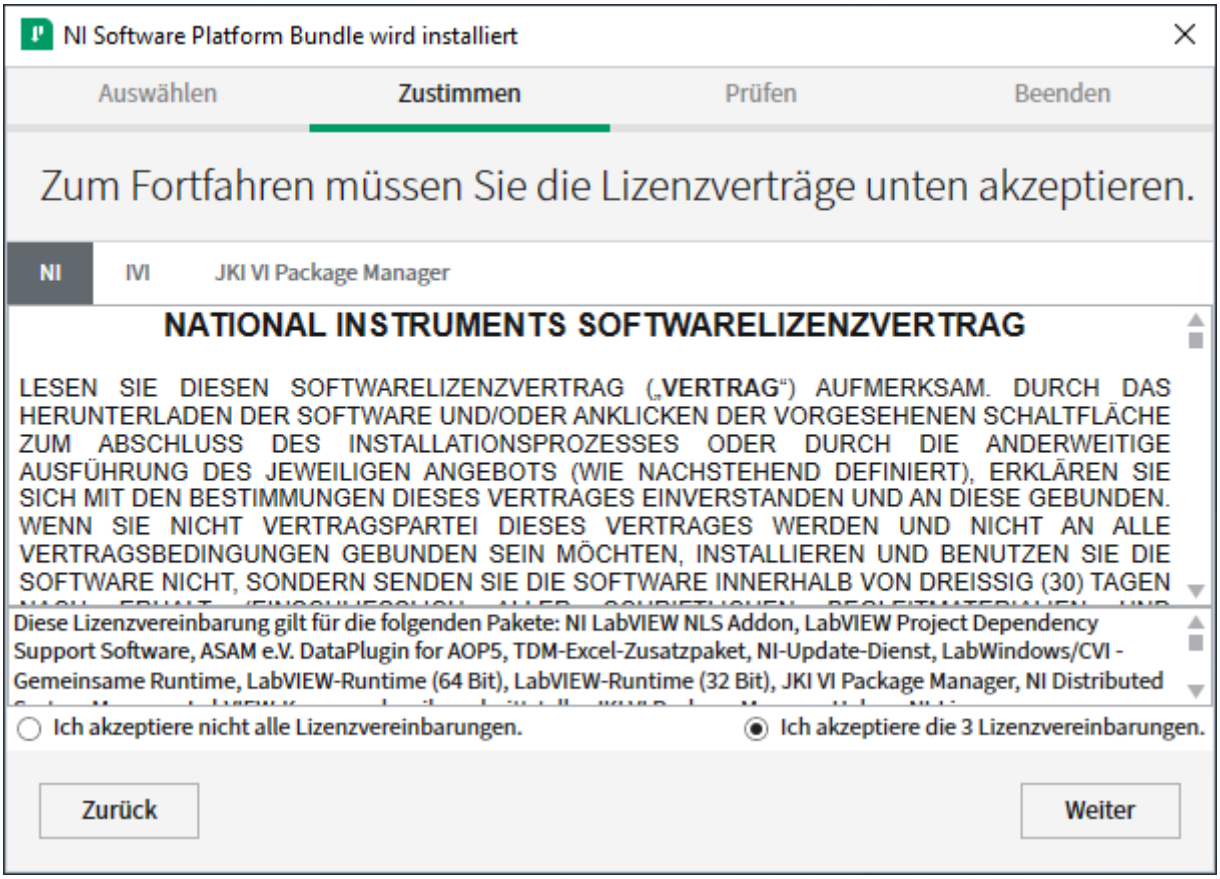


Vor der Installation der ausgewählten Softwarepakete erhalten Sie eine Zusammenfassung. Wenn Sie auf **[Weiter]** klicken, beginnt die Installation.

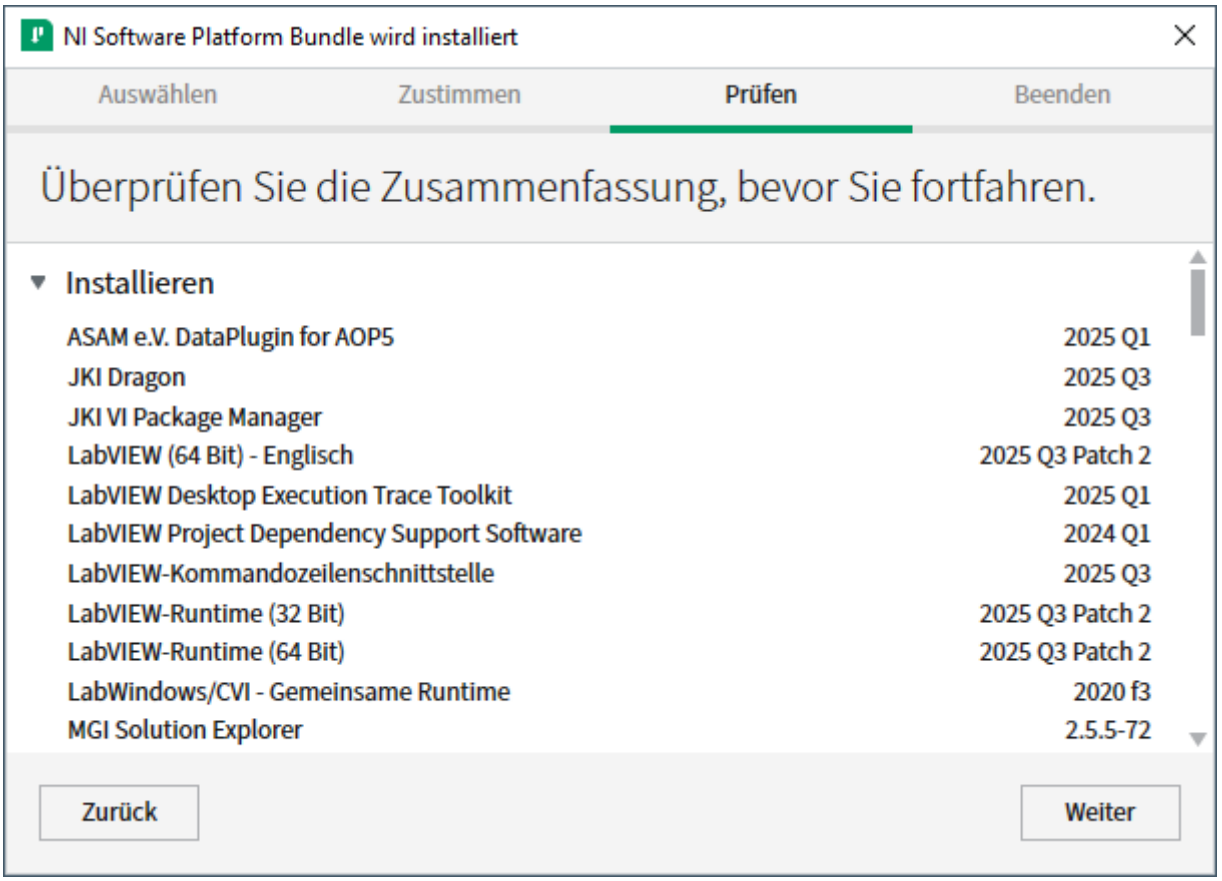


Im nächsten Schritt müssen Sie die installierten Softwarepakete aktivieren. Klicken Sie auf **[Zum Aktivieren anmelden]**.

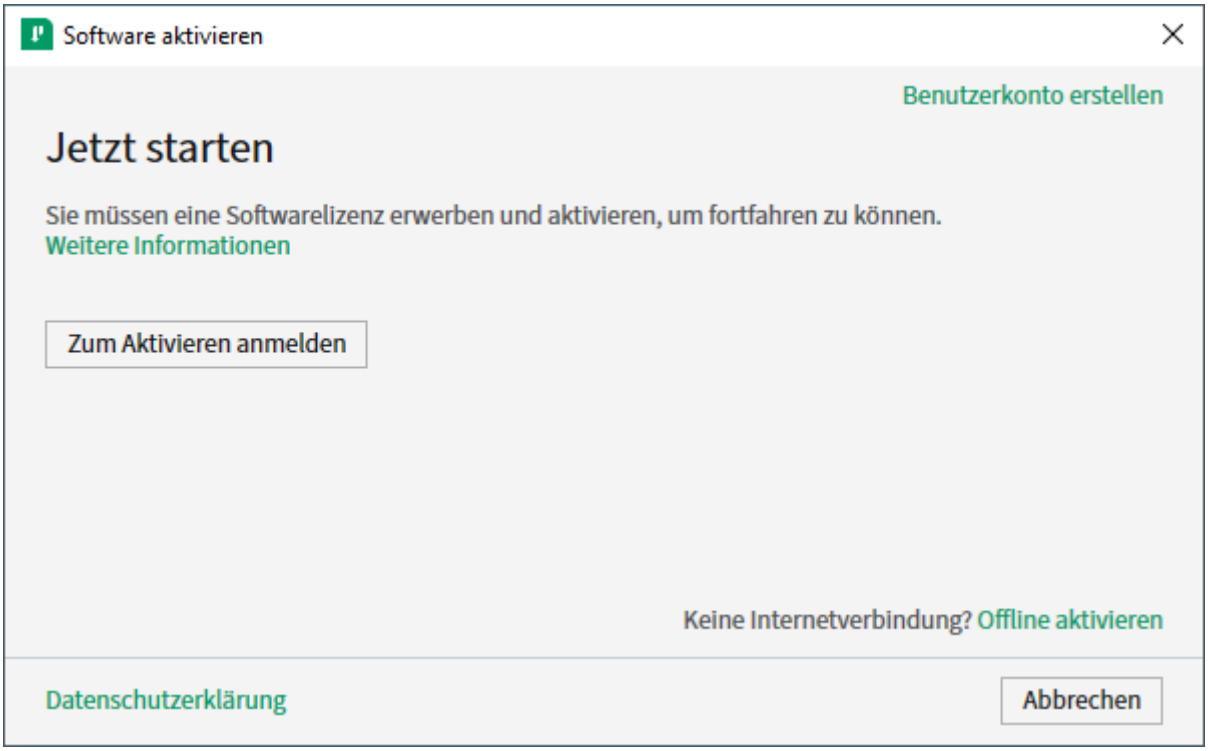


Melden Sie sich mit Ihrem NI-Account an oder erstellen Sie einen neuen Account.

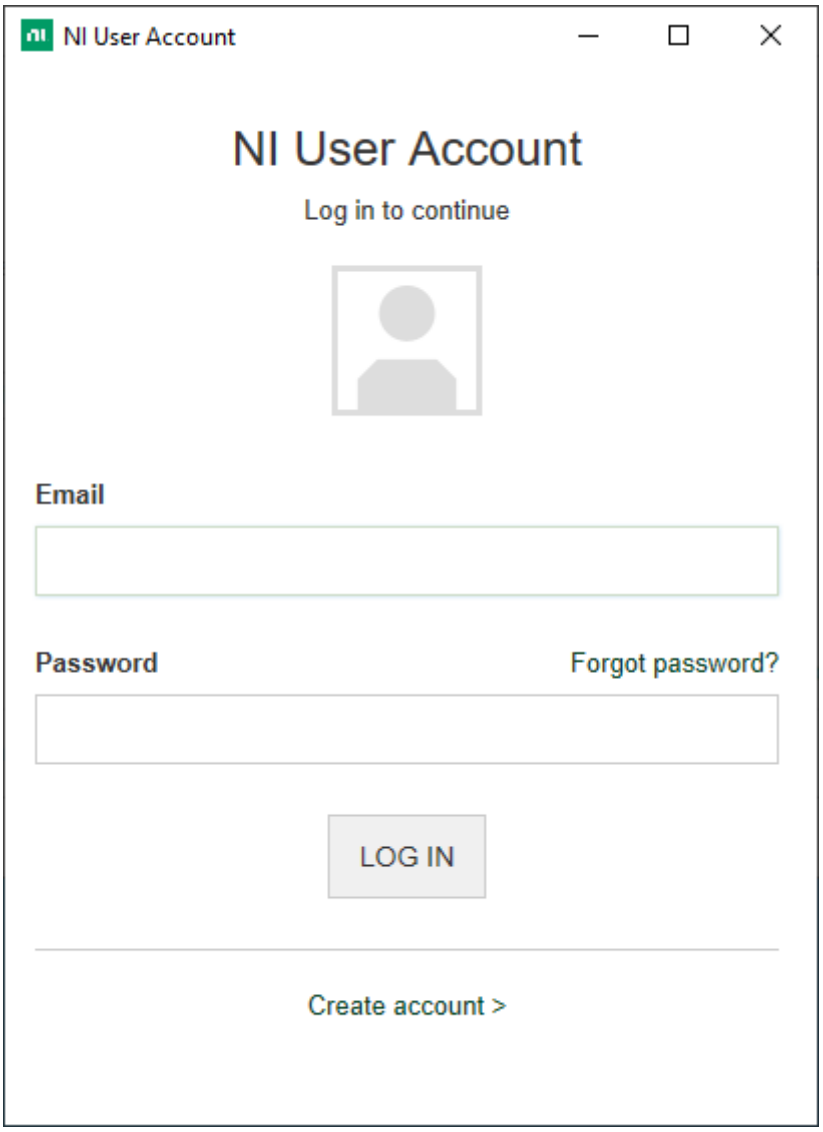

Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt **[Mit einem Volumenlizenzserver verbinden]** und geben den Lizenzserver des GITZ [siehe oben] an.

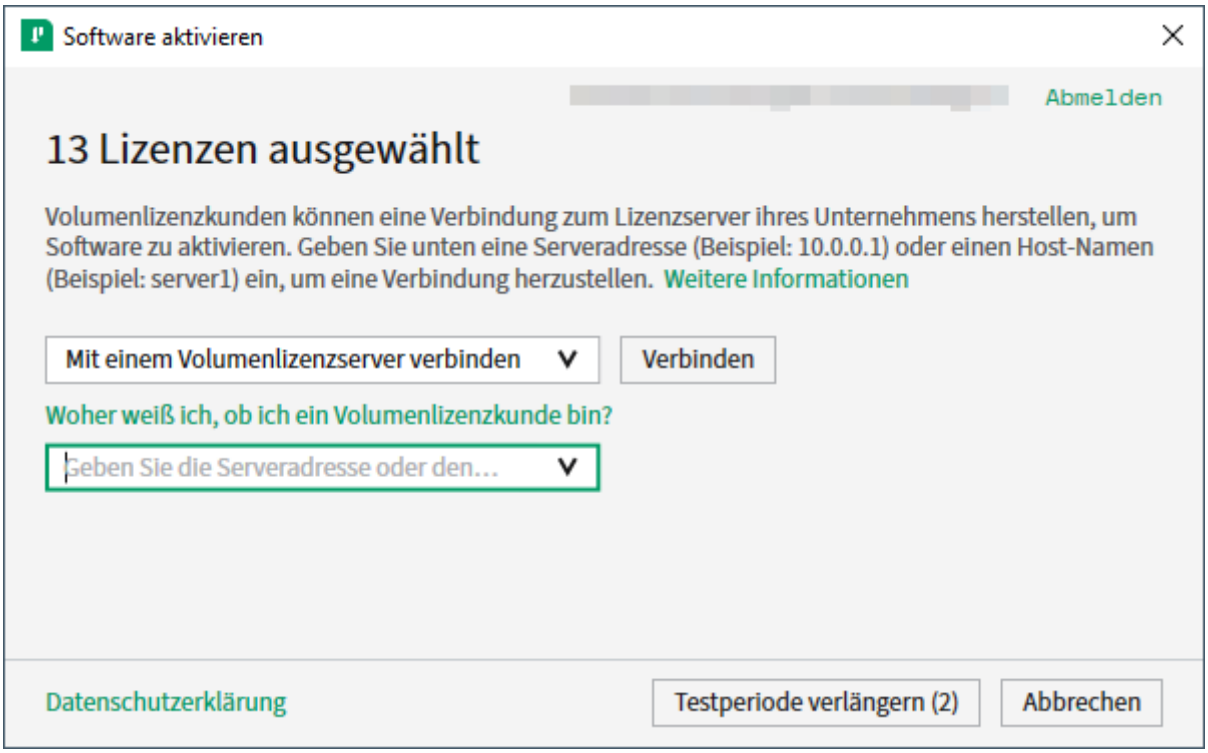


Damit ist die Verbindung zum Lizenzserver abgeschlossen. Für die Aktivierung von LabVIEW muss nachfolgend noch eine Berechtigungsanfrage gesendet werden. Wählen Sie **[Schließen]**.

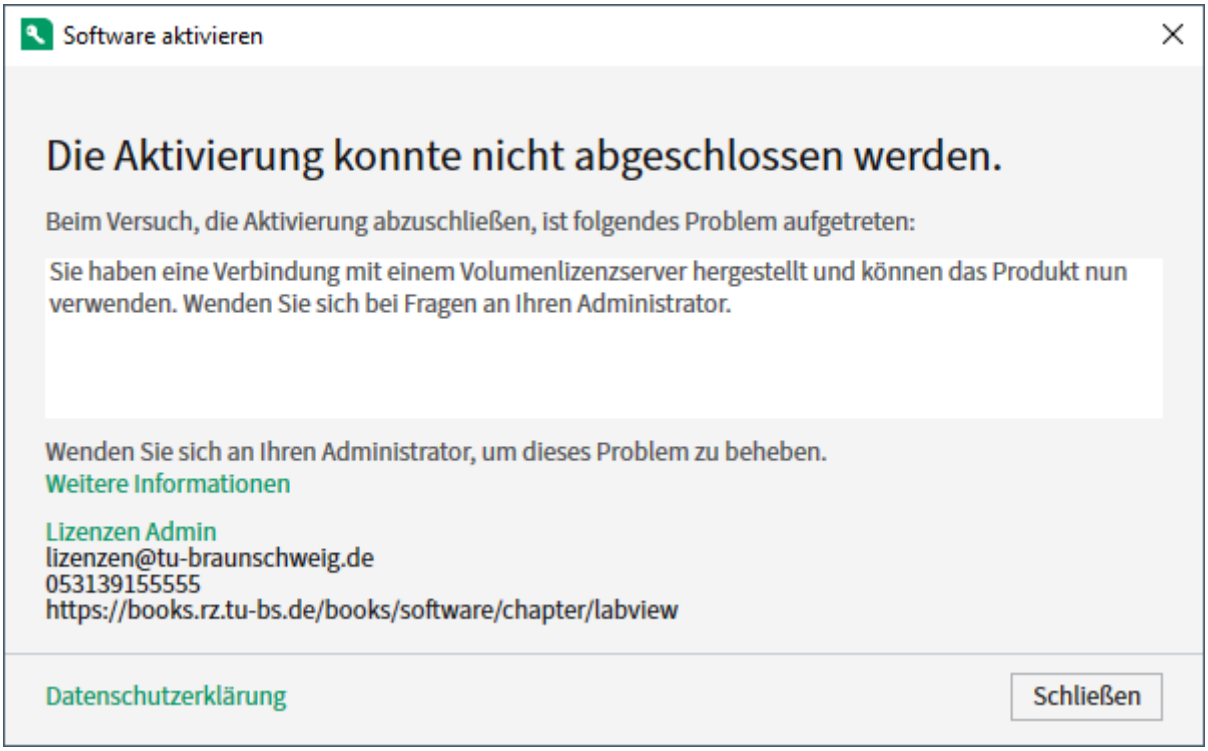

Für die Berechtigungsanfrage öffnen Sie im nächsten Schritt den **NI-Lizenzmanager**. Sie finden diesen im Startmenü oder alternativ direkt im Installationsordner von LabVIEW. Im Untermenü **[Netzwerklizenzen]** finden Sie bereits alle Informationen zur Lizenz. Für eine Berechtigungsanfrage wählen Sie unter Client den Punkt **[Verwalten]**.



Es öffnet sich das Menü **Client verwalten**, in welchem Sie die Berechtigungsanfrage erstellen können. Füllen Sie die Angaben zu Ihrem Computer aus und wählen unter Gruppen Ihr für LabVIEW berechtigtes Institut aus. Bestätigen Sie die Berechtigungsanfrage mit **[Anfrage senden]**.

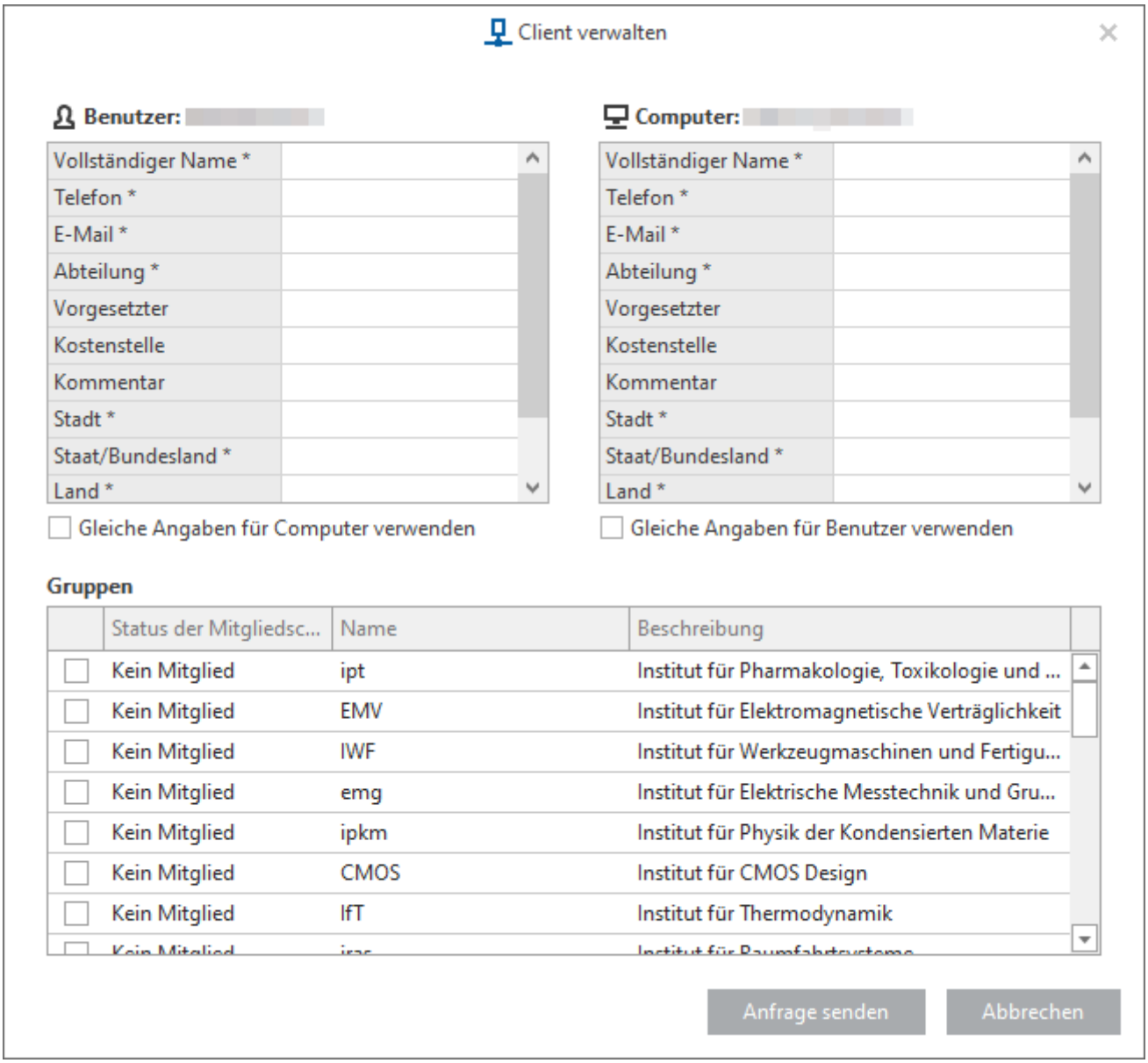

Ihre Berechtigungsanfrage wird zeitnah vom LabVIEW-Administrator bearbeitet. Der Lizenzierungsprozess ist damit abgeschlossen.

Created 2024-03-01 08:56:23 UTC by Hannes Leusmann
Updated 2025-12-18 11:39:04 UTC by Hannes Leusmann